



Domowa
Opieka
Medyczna



Instrukcja dla użytkownika platformy DOM dotycząca programu Glikemia

Spis treści

1	Logowanie	3
2	Dashboard	3
3	Lista pacjentów.....	5
4	Program Glikemia.....	5
4.1	Rozpoczęcie programu Glikemia u pacjenta	5
4.2	Edycja wartości stężeń	7
4.3	Zbieranie pomiarów - Pacjent	8
4.4	Wyniki pomiarów	8
4.5	Zakończenie programu	9
4.6	Dodanie nowego pacjenta z programem Glikemia	10

1 Logowanie

W celu zalogowania się do systemu należy przejść na stronę <https://dom.mz.gov.pl/>



Witaj

Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

[Instrukcja użytkownika dla lekarza POZ](#)

[Instrukcja użytkownika dla pacjenta](#)

Na tej stronie należy wprowadzić login i hasło. Login powinni Państwo otrzymać przez system SZOI lub portal świadczeniodawcy. Hasło do systemu jest generowane na podstawie numeru PESEL oraz imienia lekarza. Dla przykładu:

PESEL: 5 0 1 0 0 6 1 4 5 9 5

Imię: Krzysztof

Hasło: 00649k


Hasło składa się z 2, 4, 6, 8, i 10 cyfry numeru PESEL oraz z małej pierwszej litery imienia lekarza.

2 Dashboard

Po zalogowaniu pojawi się dashboard. Znajdują się tutaj 3 sekcje:


- Twoi pacjenci z podziałem na program,
- Dzisiejsze teleporady,
- Dzisiejsze alerty.

W sekcji Twoi pacjenci znajdują się informacje o liczbie aktywnych pacjentów w każdym z programów:

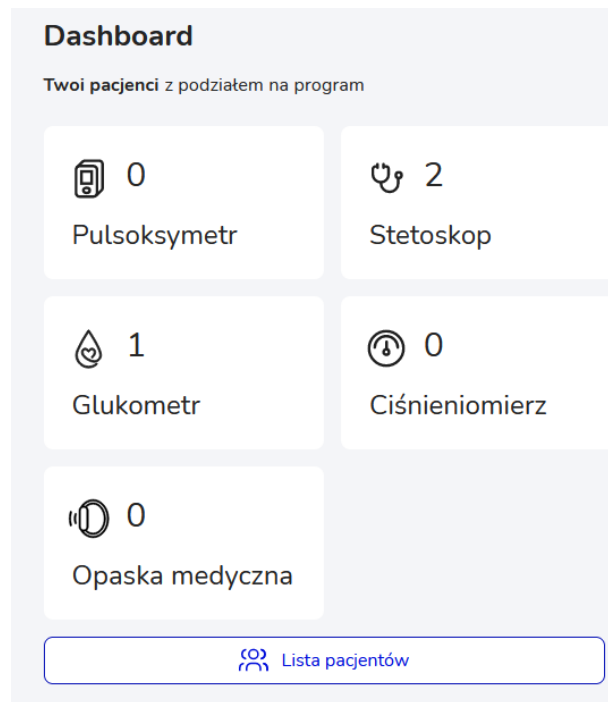

Wybierając dowolny „kafelek” nastąpi przeniesienie do widoku z listą pacjentów z włączonym filtrem na wybrany program.

Aby przejść do listy wszystkich pacjentów należy wybrać przycisk *Lista pacjentów* na Dashboardzie lub w menu bocznym.

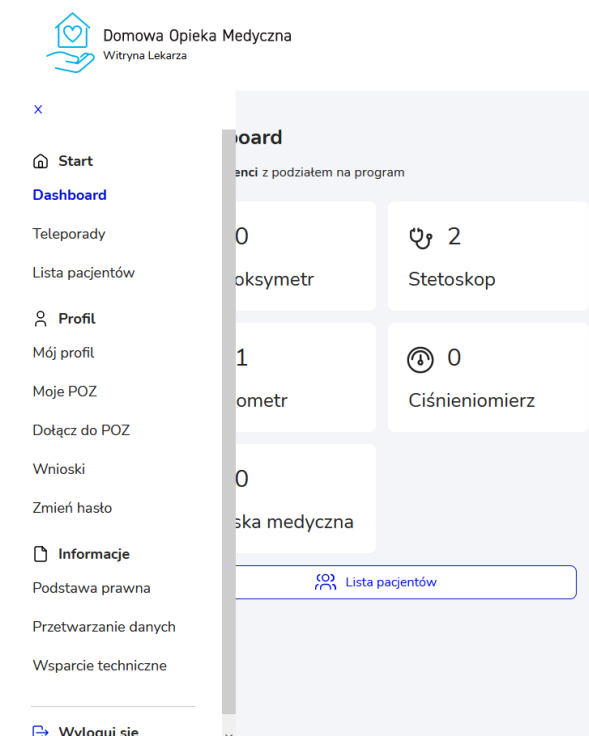

3 Lista pacjentów

Na widoku listy pacjentów znajdują się podstawowe dane pacjenta, urządzenia pomiarowe, z których korzysta w ramach programu DOM oraz kilka innych informacji. Lista ta może być filtrowana po POZ, z którymi zalogowany lekarz współpracuje oraz po typie urządzenia pomiarowego jakim posługuje się pacjent.


Dodatkowo, można również pokazać wszystkich pacjentów z danego POZ, również przypisanych do pozostałych lekarzy, którzy współpracują z wybranym POZ. Zalogowany lekarz może przeglądać pacjentów przypisanych do innych lekarzy w obrębie tego samego POZ.

Przy użyciu pola Szukaj można również wyszukać dowolnego pacjenta na liście. Można tego dokonać wpisując fragment nazwiska, imienia, numeru pesel lub nr telefonu.

Program „Glikemia” oznaczony jest w tabeli w kolumnie „Urządzenia” ikoną przedstawioną poniżej:



Aby wyświetlić na liście pacjentów, którzy są przypisani do programu „Glikemia” należy w polu filtracji „Wybierz urządzenie pomiarowe” wybrać pozycję „Glukometr”.

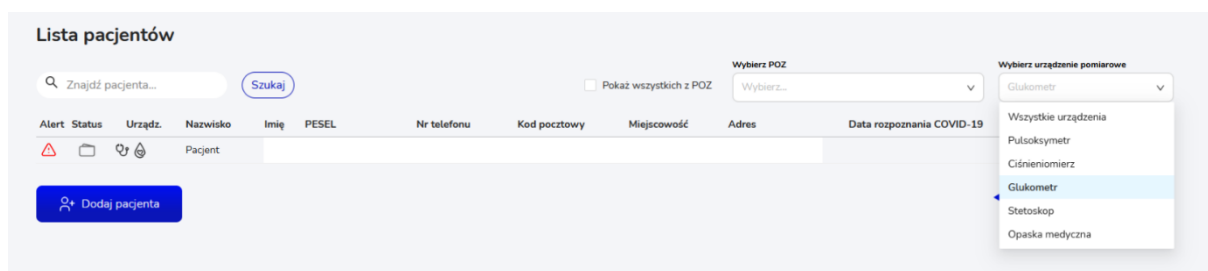


4 Program Glikemia


4.1 Rozpoczęcie programu Glikemia u pacjenta

W celu rozpoczęcia programu „Glikemia” u danego pacjenta należy:


1. Wyszukać go na liście pacjentów i przejść w jego szczegóły wybierając odpowiedni wiersz w tabeli (lub dodać nowego pacjenta i uruchomić mu program – opisane w rozdziale 4.6);
2. W szczegółach pacjenta należy przejść do zakładki „Ustawienia” i wybrać przycisk *Rozpocznij* przy wierszu „Glikemia”

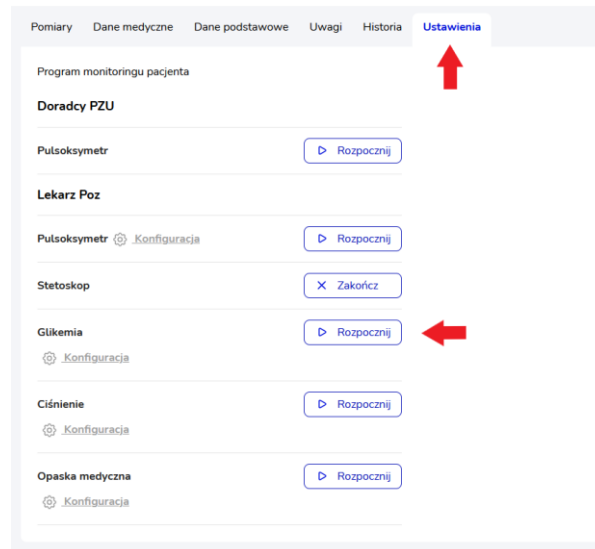

3. Po wybraniu przycisku *Rozpocznij* zostaje wyświetlone okno modalne z zatwierdzeniem wyboru. Jeżeli chcemy rozpocząć program „Glikemia” u pacjenta należy wybrać przycisk *Tak, chcę*. Jeżeli chcemy zrezygnować z uruchomienia programu należy wybrać przycisk *Nie, nie chcę* (okno zostanie zamknięte, program nie zostanie rozpoczęty).

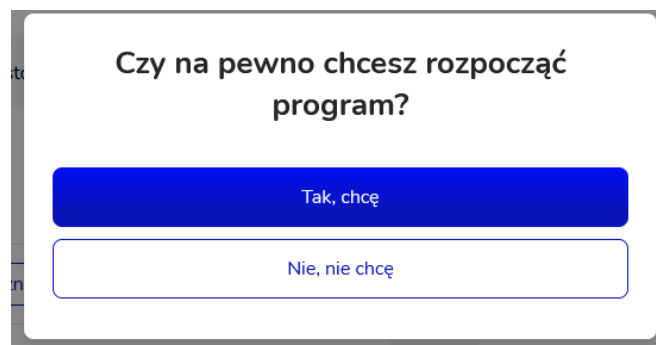

4. Jeżeli zostanie wybrana opcja „Tak, chcę” zostanie wyświetlone potwierdzenie rozpoczęcia programu.

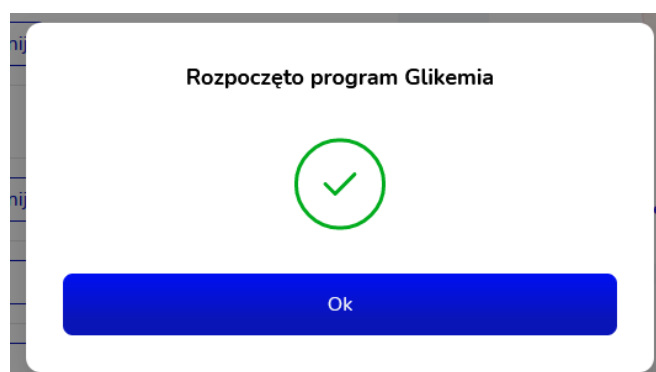

5. Po wybraniu przycisku *Ok* zostaje wyświetlone okno z konfiguracją – ustawieniem indywidualnych poziomów alarmowych. Na ich podstawie pacjent będzie otrzymywał odpowiednie powiadomienia przypominające o odpowiedniej diecie lub zalecające kontakt z lekarzem. W polach wpisane są wartości domyślne, które można zmienić dla danego pacjenta. Po wybraniu przycisku *Zapisz* konfiguracja zostaje zapisana.

Indywidualne ustawienia poziomów alarmowych

Pacjent na podstawie zdefiniowanych poniżej wartości będzie otrzymywał stosowne powiadomienia.

Średnie stężenie z trzech dni przekracza

Dla badań przed posiłkiem

130 mg/dl

Dla badań po posiłku

180 mg/dl

Pojedynczy pomiar

Niższy niż

70 mg/dl

Większy niż

250 mg/dl

Powyższe wartości można zawsze zmienić w konfiguracji programu.

Zapisz


4.2 Edycja wartości stężeń

Ustawione dla pacjenta wartości w konfiguracji można w każdej chwili zmienić. W tym celu należy wybrać przycisk *Konfiguracja*, a następnie wprowadzić nowe wartości i zatwierdzić przyciskiem *Zapisz*. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzania zmian w konfiguracji należy wybrać przycisk *Anuluj* (wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane, okno konfiguracji zostanie zamknięte).


The diagram illustrates the process of editing alarm levels. On the left, a screenshot of the 'Ustawienia' (Settings) menu shows various monitoring parameters. A red arrow points to the 'Glikemia' (Glucose) section, which has a 'Konfiguracja' (Configuration) icon. A blue arrow points from this icon to the right, where a larger screenshot shows the 'Indywidualne ustawienia poziomów alarmowych' (Individual alarm level settings) screen. This screen contains input fields for pre-meal (130 mg/dl), post-meal (180 mg/dl), and single measurement (70 mg/dl lower, 250 mg/dl higher) thresholds, along with 'Anuluj' (Cancel) and 'Zapisz' (Save) buttons.

4.3 Zbieranie pomiarów - Pacjent

W przypadku programu „Glikemia” pacjent sam wprowadza w aplikacji (na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej) wynik wyświetlany na glukometrze. Dodatkowo, może zaznaczyć pole wyboru „Po posiłku”. Pacjent powinien wprowadzać pomiary zgodnie z ustaleniami z lekarzem.

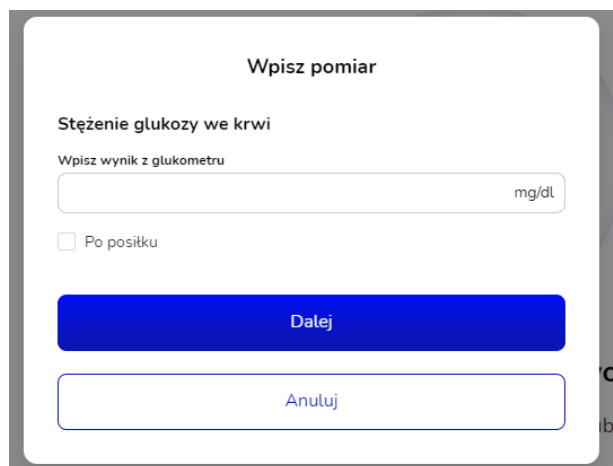


The screenshot shows a form titled "Wpisz pomiar" (Enter measurement). Under the heading "Stężenie glukozy we krwi" (Blood glucose concentration), there is a text input field labeled "Wpisz wynik z glukometru" (Enter result from glucometer) with a unit of "mg/dl" on the right. Below the input field is a checkbox labeled "Po posiłku" (After meal). At the bottom of the form are two buttons: a blue "Dalej" (Next) button and a white "Anuluj" (Cancel) button with a blue border.

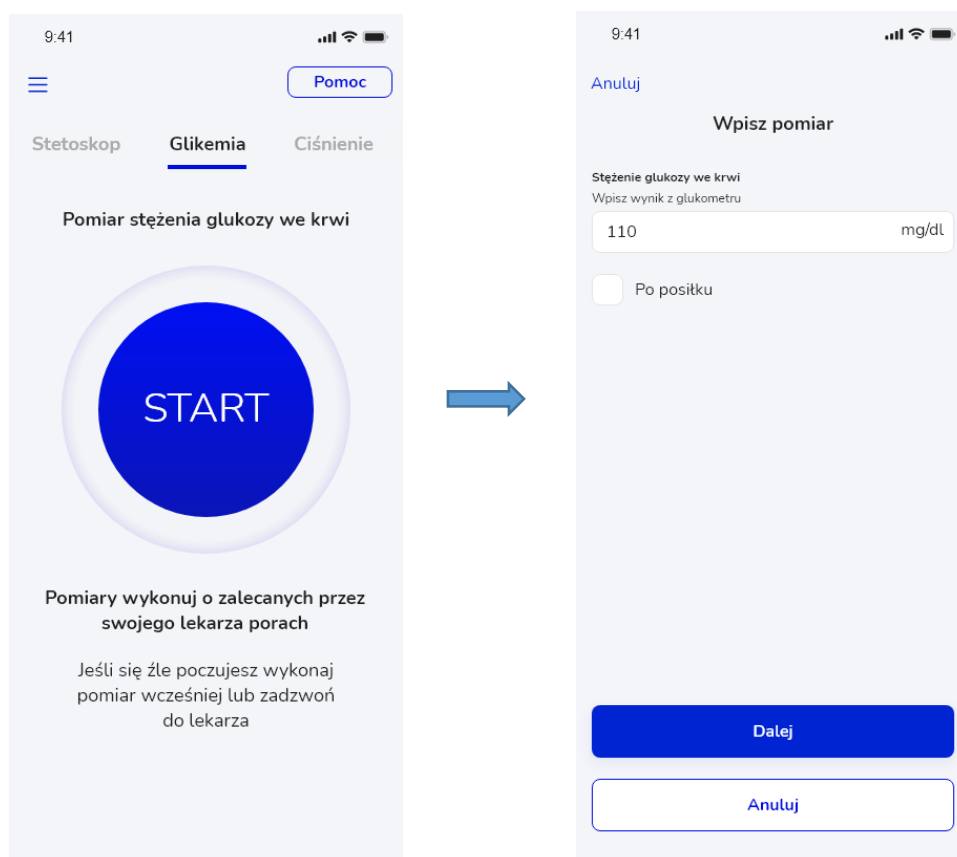


4.4 Wyniki pomiarów

Wprowadzone przez pacjenta wyniki pomiarów glukometrem lekarz może przeglądać w szczegółach pacjenta w zakładce „Pomiary”. Znajdują się tutaj wyniki z wszystkich programów, w których uczestniczy pacjent, dlatego w polu „Wybierz program” należy wybrać pozycję „Glikemia”, aby wyświetlić wyniki dla programu „Glikemia”.

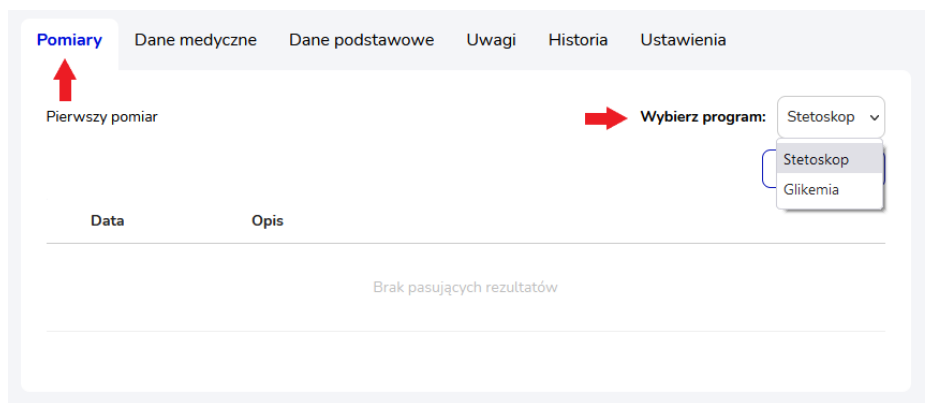


W wyświetlonej tabeli pomiarów glukometrem widnieje informacja o dacie i godzinie pomiaru, wartości oraz czy pomiar wykonywany był po posiłku.

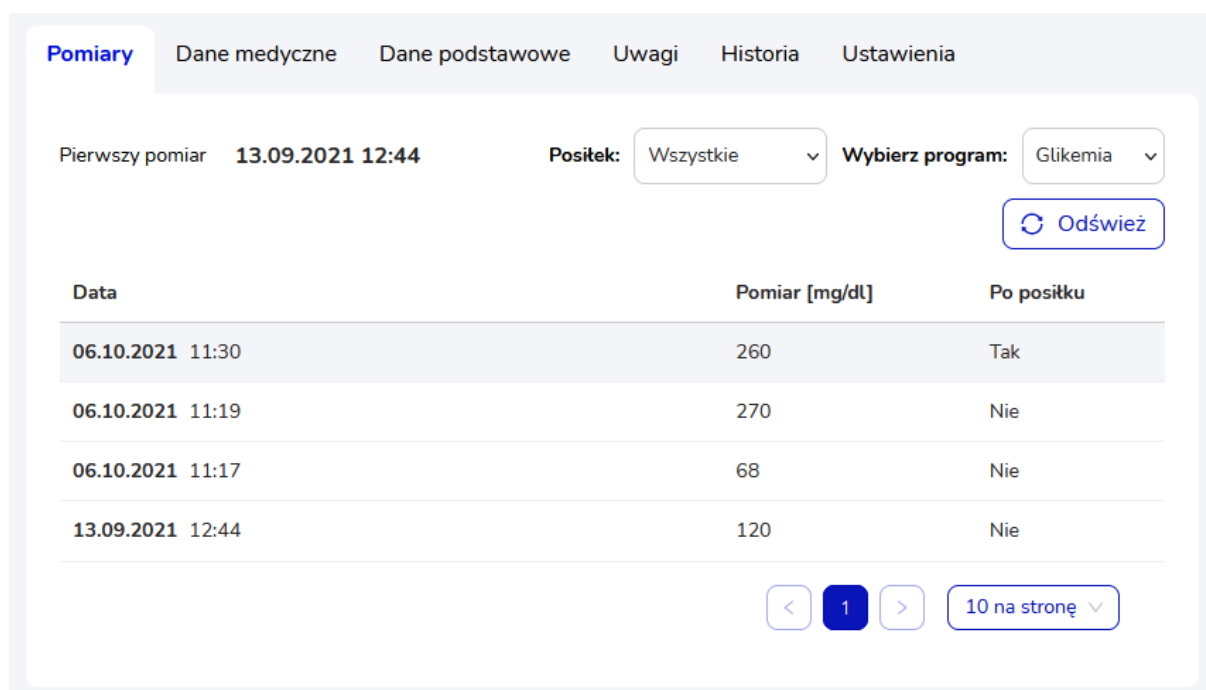


Nad tabelą znajduje się informacja o dacie i godzinie pierwszego pomiaru, a także pole filtracji wg posiłku – można wybrać czy chcemy zobaczyć wszystkie pomiary pacjenta, czy te wykonywane przed lub po posiłku. Znajduje się tutaj również przycisk odświeżenia wyników pomiarów *Odśwież*.

4.5 Zakończenie programu

W celu zakończenia programu „Glikemia” u pacjenta należy wybrać w jego szczegółach w zakładce „Ustawienia” przycisk *Zakończ* przy danym programie.

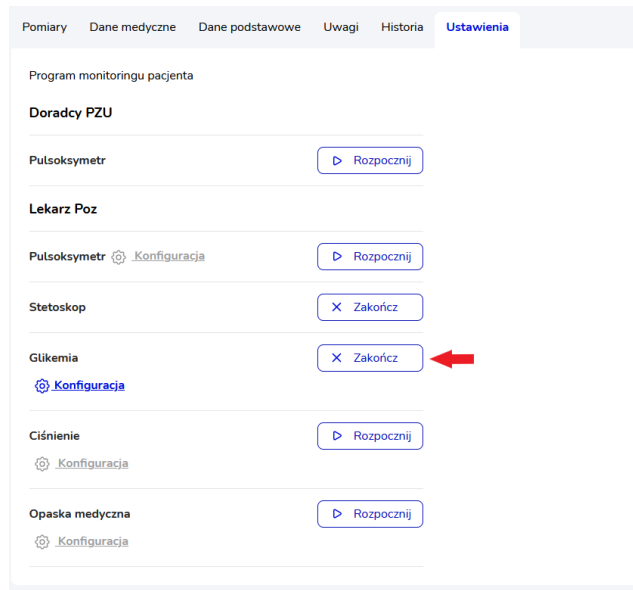


Zostanie wyświetlone wtedy okno modalne z obowiązkowym do uzupełnienia uzasadnieniem. Po wprowadzeniu uzasadnienia należy zatwierdzić przyciskiem *Tak, chcę*, aby zakończyć program. Jeżeli chcemy zrezygnować z zakończenia programu należy wybrać przycisk *Nie, nie chcę* (okno zostaje zamknięte, program nie zostaje zakończony).

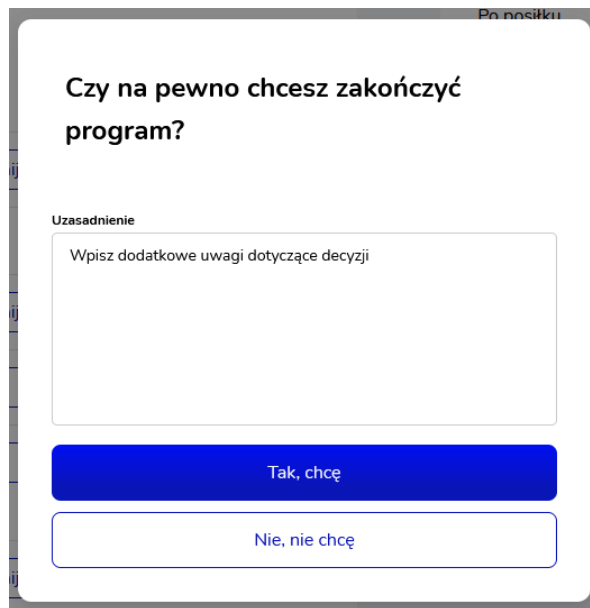

4.6 Dodanie nowego pacjenta z programem Glikemia

Aby dodać nowego pacjenta do systemu z uruchomionym od razu programem „Glikemia” należy przejść do widoku Lista pacjentów i wybrać przycisk *Dodaj pacjenta*.

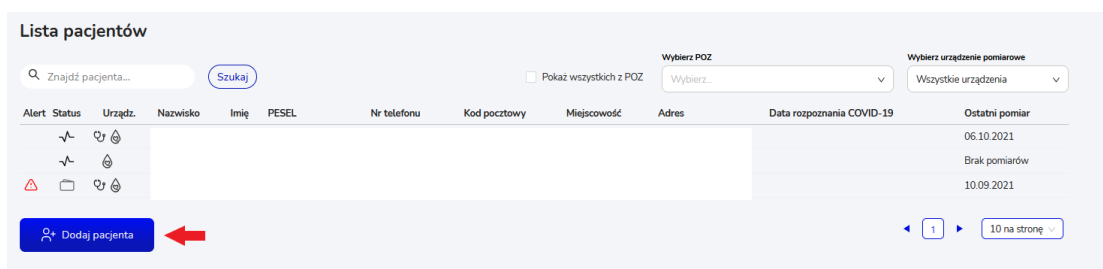

Zostanie wtedy wyświetlone okno modalne z obowiązkowymi do uzupełnienia polami dotyczącymi danych pacjenta. Pole „Wybierz lekarza POZ” jest zablokowane do uzupełnienia przez lekarza (pacjent zostaje automatycznie przypisany do lekarza, który go dodaje). Dane osoby kontaktowej są polami nieobowiązkowymi, ale zalecanymi do uzupełnienia. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać przycisk *Dalej*. Wybranie przycisku *Anuluj* spowoduje wycofanie się z operacji dodawania pacjenta, dane nie zostaną zapisane.

The screenshot shows a modal window titled "Dodaj pacjenta" with the subtitle "Dane podstawowe". It contains several input fields: "Wybierz POZ" (dropdown), "Wybierz lekarza POZ" (dropdown with "Wybierz lekarza..." placeholder), "Dane osobowe" section with "Imię", "Nazwisko", "PESEL", and "Numer telefonu" (with "48" pre-filled), and "Dane osoby kontaktowej" section with "Imię osoby kontaktowej" and "Nazwisko osoby kontaktowej". At the bottom are "Anuluj" and "Dalej" buttons.

Na wyświetlonym widoku wyboru programu domyślnie wybrany jest program „Pulsoksymetr”, aby uruchomić program „Glikemia” należy zaznaczyć go na liście i zatwierdzić przyciskiem *Zapisz*. Wybranie przycisku *Wstecz* spowoduje powrót do widoku uzupełniania formularza danych pacjenta.

The screenshot shows a modal window titled "Wybierz program do którego chcesz dodać pacjenta" with the subtitle "Możesz zmienić ten wybór później w ustawieniach". It includes a "Monitorowane przez:" section with "Doradcy PZU" and "Pulsoksymetr" (checked with a blue checkmark). Below is a radio button for "Czy pacjent posiada własny pulsoksymetr?" with "Nie" selected. There is a date field for "Data rozpoznania COVID-19" with the placeholder "dd.mm.rrrr". A "Lekarz POZ" section lists "Pulsoksymetr", "Glikemia", "Ciśnienie", "Stetoskop", and "Opaska medyczna", all with unselected radio buttons. At the bottom are "Wstecz" and "Zapisz" buttons.



The screenshot shows the same modal window as the left one, but with "Glikemia" selected in the "Lekarz POZ" section (checked with a blue checkmark). The "Pulsoksymetr" option is now unselected. The "Zapisz" button is highlighted in blue.

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone okno z konfiguracją – ustawieniem indywidualnych poziomów alarmowych. Na ich podstawie pacjent będzie otrzymywał odpowiednie powiadomienia przypominające o odpowiedniej diecie lub zalecające kontakt z lekarzem. W polach wpisane są wartości domyślne, które można zmienić dla danego pacjenta. Po wybraniu przycisku *Zapisz* konfiguracja zostaje zapisana, a pacjent zostaje dodany do systemu z uruchomionym programem „Glikemia”. Konfigurację można następnie edytować w ustawieniach w szczegółach pacjenta (rozdział 4.2).

Dodanie nowego Pacjenta skutkuje wysłaniem mu powitalnej wiadomości SMS zawierającej niezbędne informacje wraz z hasłem.

Dane podstawowe pacjenta można później (po dodaniu użytkownika) edytować w jego szczegółach w zakładce „Dane podstawowe”. Istnieje tam również możliwość wysłania ponownie kodu SMS do pacjenta, jeśli nie otrzymał go po założeniu konta.