

# Instrukcja obsługi

## Aplikacji PulsoCare

# Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych

Aplikację możesz zainstalować ze sklepów Google (Google Play) i Apple (App Store).

Każdy pacjent, którego lekarz zgłosi do systemu, dostanie SMS z linkiem do odpowiedniego sklepu z aplikacjami i unikalnym kodem, którym zaloguje się do aplikacji.

## Logowanie do aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zaloguj się do niej.

**Przy pierwszym logowaniu podaj:**

- numer telefonu przekazany lekarzowi
- kod z SMS-a

**Następnie zaakceptuj zgody na przetwarzanie danych osobowych.**



# Podłączenie urządzenia pulsoksymetru

**Aplikacja łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth. Zanim rozpoczniesz pomiar, połącz telefon z aplikacją z pulsoksymetrem.**

**Aplikacja pokaże, co zrobić, aby połączyć telefon z pulsoksymetrem.**

**Przejdź do ustawień Bluetooth w swoim telefonie i tam dodaj nowe urządzenie.**


**Procedura łączenia telefonu z urządzeniami zewnętrznymi przez Bluetooth może być inna dla każdego telefonu.**



**Szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu i tutaj:**

<https://support.google.com/androidanswer/9075925?hl=pl>

<https://support.apple.com/pl-pl/HT204091>

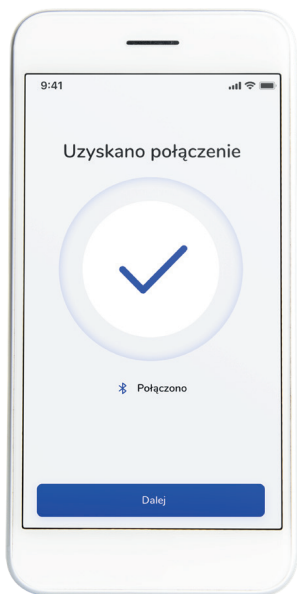


**Jak tylko  
połączysz  
telefon  
z urządzeniem,  
w aplikacji  
zobaczysz  
ekran  
z informacją  
o powodzeniu  
tej akcji.**

## **Wykonywanie pomiarów**

**Gdy zalogujesz się i połączysz telefon z pulsoksymetrem przez Bluetooth, aplikacja jest gotowa do pracy.**


**Aby wykonać pomiar,  
wciśnij START.**

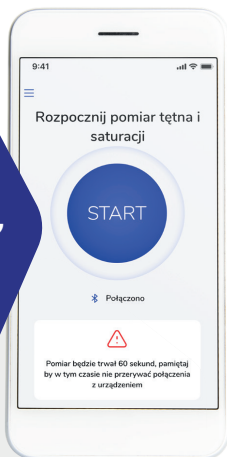

**W kolejnym kroku aplikacja poinformuje Cię, jak wykonać pomiar.**



**Szczegółowe informacje jak przeprowadzić pomiar, znajdziesz w instrukcji pulsoksymetru.**

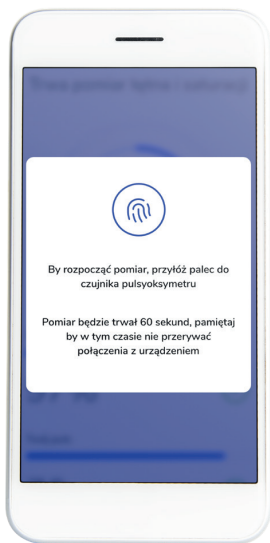

**Rozpoczęcie pomiaru zasygnalizuje komunikat w aplikacji.**

**Dodatkowo na ekranie zobaczysz, ile czasu pozostało do zakończenia pomiaru.**

# Po zakończonym pomiarze zobaczysz wyniki w aplikacji.

**Aplikacja poprosi Cię o dodatkowe dane.**

**Pomiary możesz wykonać urządzeniami innymi niż pulsoksymetr.**




**Aplikacja poprosi Cię również o dane uzupełniające do wywiadu medycznego.**  
**Zakres danych może być różny, w zależności o decyzji lekarza.**

**Ostatni etap pomiaru to podsumowanie wszystkich danych pobranych z pulsoksymetru oraz danych wprowadzonych przez Ciebie do aplikacji.**

**Na tym etapie możesz wysłać wyniki lub powtórzyć pomiar jeżeli okaże się, że któraś z danych jest błędna.**

**Pamiętaj, aby telefon miał połączenie z internetem przez sieć komórkową lub wifi podczas wysyłania wyników.**

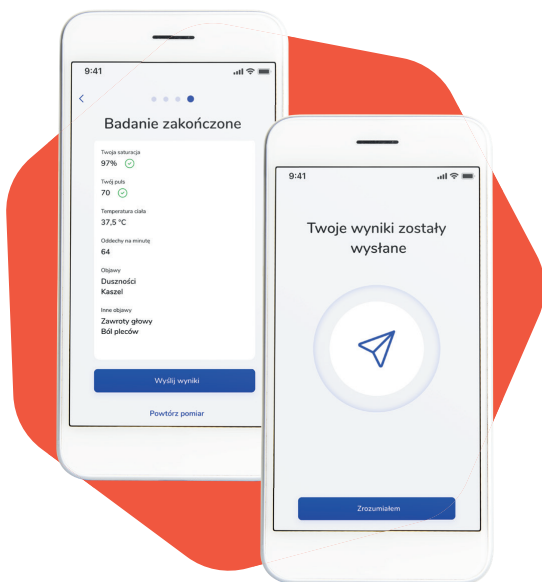

**Po wysłaniu wyników zobaczysz komunikat z potwierdzeniem.**

**Kiedy klikniesz ZROZUMIAŁEM, wrócisz na ekran początkowy i możesz wykonać kolejny pomiar.**